


## Hinweismeldung für TFG-Produkte und Tierarzneimittel



Produkte aus Blutbestandteilen oder Sera sind nach Transfusionsgesetz (TFG) dokumentationspflichtig, um eine Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Auch verschreibungspflichtige Tierarzneimittel müssen stets dokumentiert werden.

Um Ihnen die Einhaltung der Dokumentationspflicht im Apothekenalltag zu erleichtern, gibt es die Möglichkeit, eine entsprechende Hinweismeldung in der Kasse anzeigen zu lassen. Wie Sie diese Hinweismeldungen aktivieren, lesen Sie in diesem Artikel.


Im Menü **Systempflege** finden Sie die **Systemeinstellungen**.

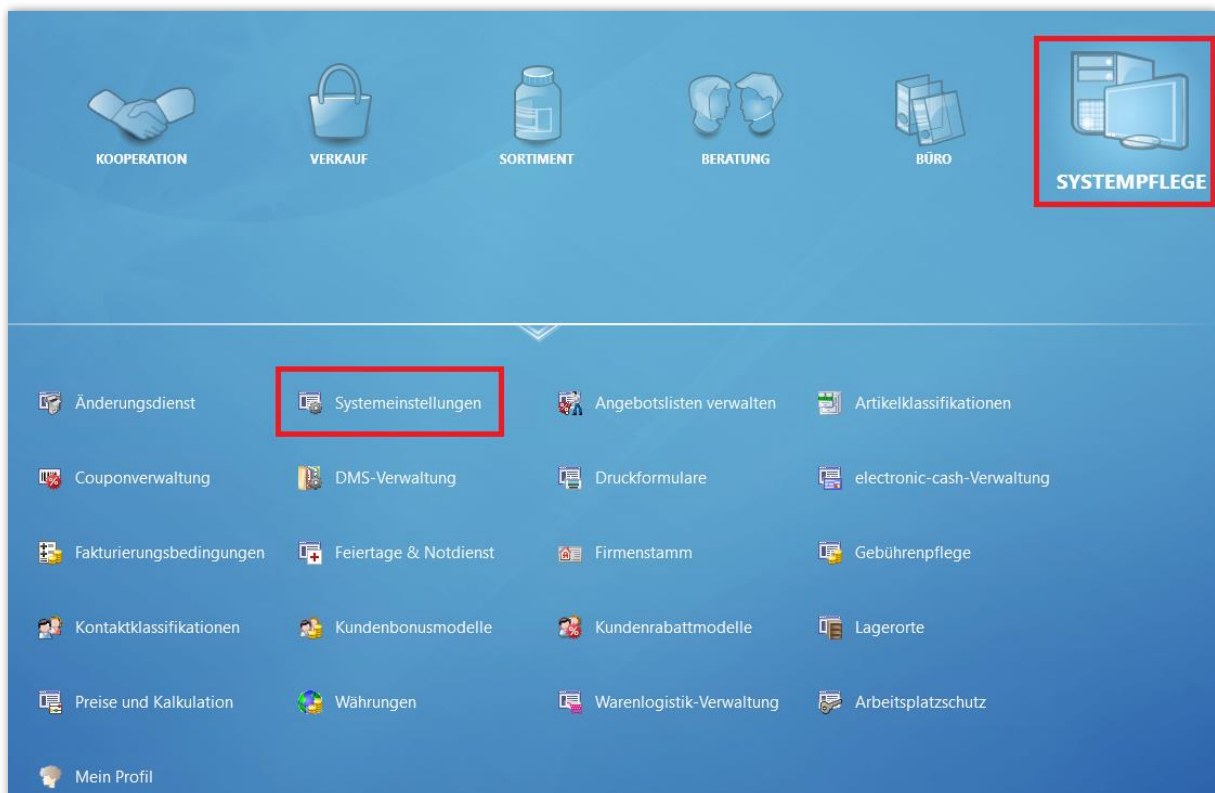

Dort navigieren Sie im Menü **Verkauf** zur **Kasse**.

Im **Gültigkeitsbereich: Systemparameter** wählen Sie die Seite **Hinweise/Abfragen** aus.

Dort finden Sie den Punkt **Hinweis Dokupflicht TFG-Produkte / Tierarzneimittel**. Setzen Sie den Haken in die  Checkbox, um die Hinweismeldung zu aktivieren.

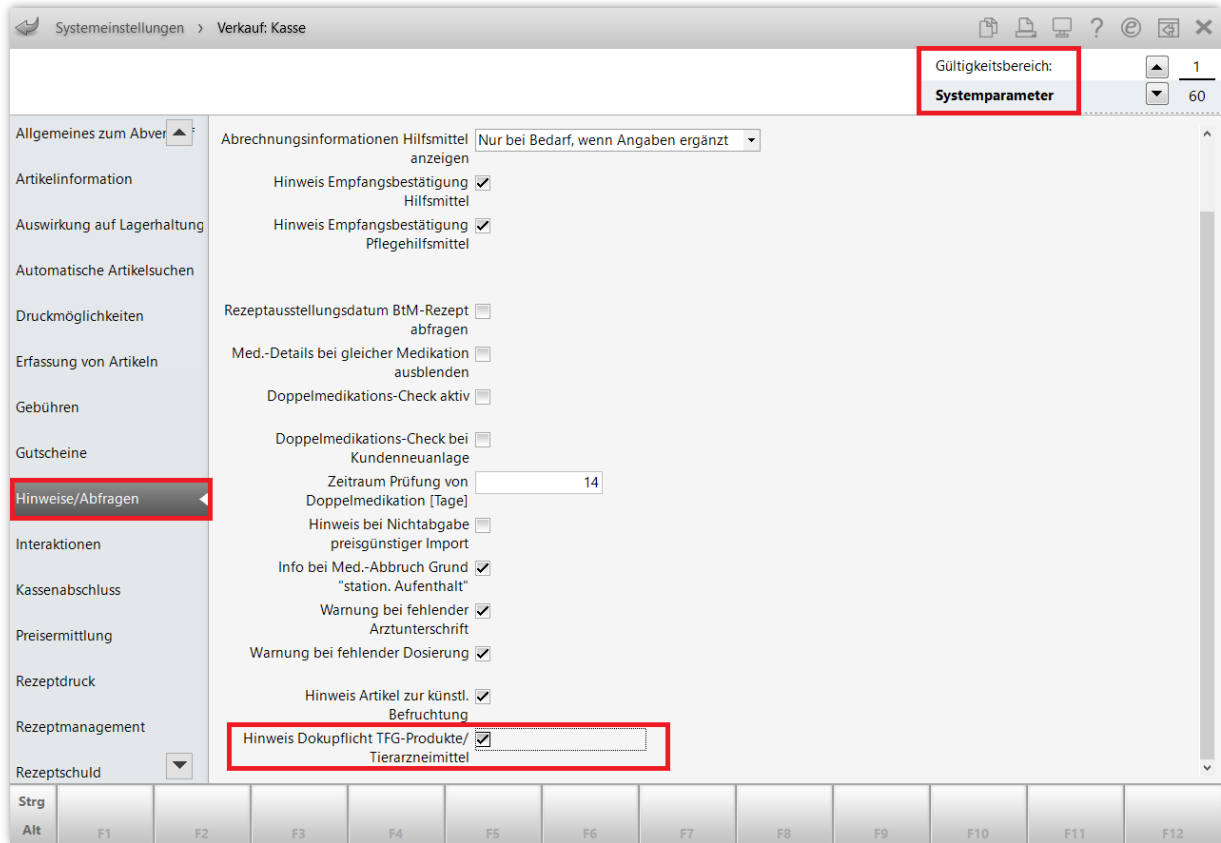

Beim Übernehmen von Blutprodukten oder verschreibungspflichtigen Tierarzneimitteln in die Kasse erscheinen nun entsprechende Hinweismeldungen.

