


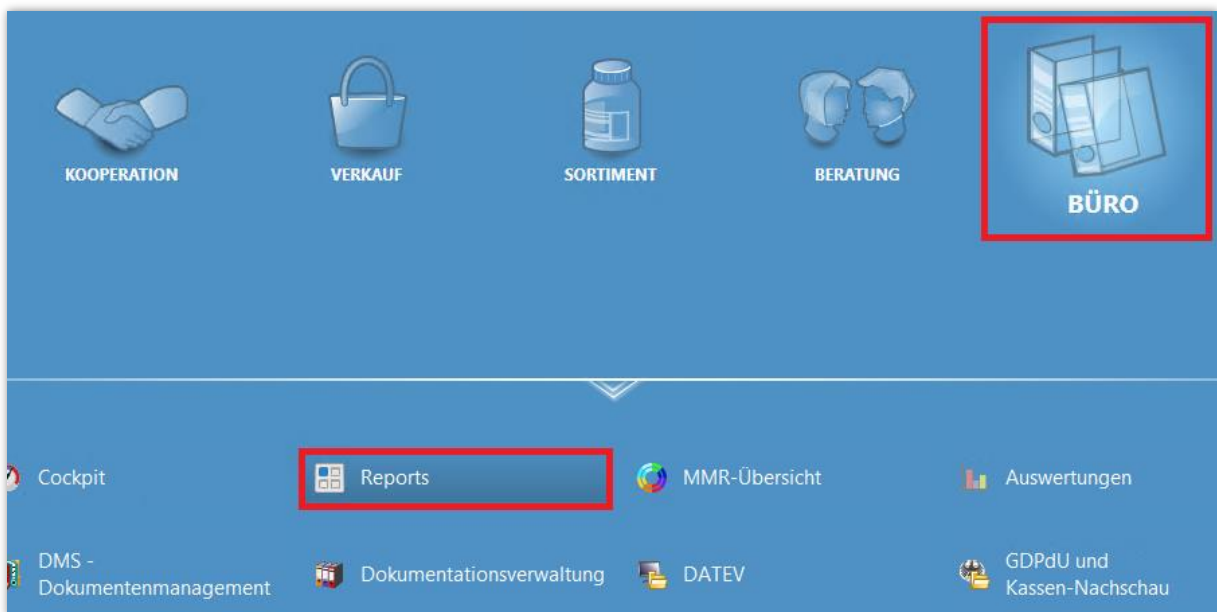
Das Modul Reports

Mit dem Modul **Reports** können Sie Auswertungen für alle Einsatzbereiche der Warenwirtschaft erstellen. Dabei stehen Ihnen zahlreiche vordefinierte Auswertungen zur Verfügung, die sich auf verschiedene Weise anpassen lassen. Die Ergebnisse einer solchen Auswertung lassen sich dann auf geeignete Weise weiterverarbeiten. Dies ermöglicht Ihnen, Änderungen in den Daten Ihrer Apotheke nach festgelegten Kriterien massenhaft durchzuführen und erspart Ihnen zeitaufwändige Handarbeit. Wie Sie dazu vorgehen können, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.




 Das kostenpflichtige Zusatzmodul **Reports Profi** bietet Ihnen zusätzliche Profi-Abfragen, Excel-Export sowie einen Bearbeitungsmodus zum Erstellen eigener Abfragen und zum Konfigurieren des Auswertungsergebnisses.

Sie finden die **Reports** im Menü **Büro**.



Es öffnet sich das Fenster **Reports**.

 Verwenden Sie idealerweise den Vollbild-Modus von IXOS, wenn Sie mit dem Modul **Reports** arbeiten. Dazu blenden Sie mit Hilfe des Buttons **Arbeitsbereich vergrößern** die Vorgangsliste aus.



Im oberen Teil des Moduls wählen Sie zuerst eine **Ergebnis-Kategorie** aus. Um beispielsweise Artikel nach bestimmten Kriterien auszuwerten, markieren Sie die Kategorie **Artikel**.

Wählen Sie dann auf der linken Seite die gewünschte **Abfrage** aus. Je nach gewählter Ergebniskategorie steht Ihnen eine große Auswahl an sinnvollen vordefinierten Abfragen, sortiert nach verschiedenen Bereichen, zur Verfügung.

Im Beispiel soll eine Auswertung zu Ladenhütern durchgeführt werden. Sie können Abfragen in der Baumstruktur auswählen oder aber auch Suchbegriffe im Feld **Suchen...** eingeben. Die Ladenhüter-Auswertung befindet sich in den **Basisauswertungen**.

The screenshot shows the 'Reports' application window. The left sidebar has 'Ladenhüter ohne Neuanlagen' selected under 'Vordefinierte Abfragen'. The main area shows a list of items with the following columns: **DAR**, **Pack.Gr**, **NP**, and **Anbieter**. The list includes items like 'Soda Club Patrone (1000)', 'Homviotensin (200)', and various 'Discardit Li Spritze' and 'Sterican' products.

	DAR	Pack.Gr	NP	Anbieter
08001358 Soda Club Patrone (1000)				
08004173 Homviotensin (200)	TAB			
08003268 Jodium LM 24 Arcana	DIL	10 ml		
08000019 Handcreme ipse	CRE	100 g		
08000047 Urobox Behälter für Urin		1 St		
08005451 Bd Discardit Li Spritze	SRI	2 ml nb		BECTON DICKINSON GMBH
08005468 Bd Discardit Li Spritze	SRI	5 ml nb		BECTON DICKINSON GMBH
08005474 Bd Discardit Li Spritze	SRI	10 ml nb		BECTON DICKINSON GMBH
08005480 Bd Discardit Li Spritze	SRI	20 ml nb		BECTON DICKINSON GMBH
08000038 Sterican 0.40X20 Grau L L	KAN	1 St nb		B. Braun Melsungen AG
08000041 Sterican 0.60X25 Blau L L	KAN	1 St nb		B. Braun Melsungen AG
08000042 Sterican 0.70X30 Schw L L	KAN	1 St nb		B. Braun Melsungen AG


Bei der Auswahl der Abfrage erscheint sofort das Ergebnis im rechten unteren Teil des Fensters. Sie können die meisten vordefinierten Abfragen jedoch noch in mehreren Kriterien an Ihre Wünsche anpassen. Dazu wählen Sie im Fenster über den Abfrage-Ergebnissen die gewünschten Kriterien aus und ändern diese.


Im Beispiel der Ladenhüterliste können Sie nach Abgabebestimmung oder Lagerorten filtern, Auslaufartikel mit ein- oder ausschließen, den Zeitraum ändern, in dem ein Artikel nicht verkauft wurde und vieles mehr – scrollen Sie durch die Liste, um alle änderbaren Suchkriterien zu prüfen.


The close-up shows the filter settings for the query. The criteria and their current values are:

- Abgabebestimmung: **<egal>**
- Lagerort: **Egal**
- Auslaufartikel: **Nein**
- Droge/Chemikalie: **Entspricht <ist nicht gesetzt>, Nein**
- Dauersortiment: **Nein**


Klicken Sie einfach auf die jeweiligen Variablen, um diese zu ändern.
 Im Falle eines **Dropdownmenüs** können Sie dieses direkt ausklappen und den gewünschten Wert auswählen.

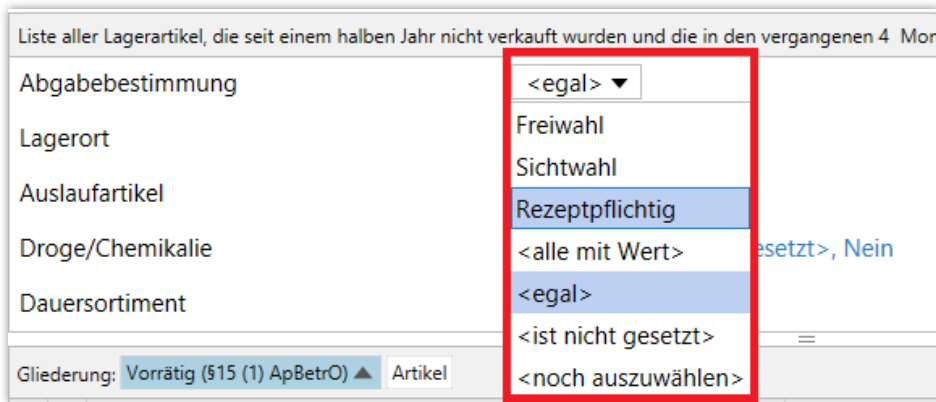

Bei Kriterien, bei denen auch eine Mehrauswahl möglich ist, gibt es am Ende der Zeile den Button  – mit diesem können Sie ein Auswahlfenster öffnen, um genauere Einstellungen vorzunehmen.

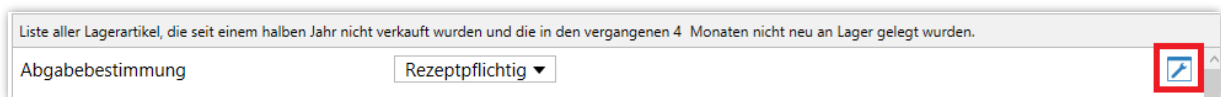

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie mit Hilfe von Checkboxes genau festlegen können, welche Artikeleigenschaften Sie in die Auswertung mit einbeziehen möchten. So können Sie bei der **Abgabebestimmung** beispielsweise sowohl *Sichtwahl* als auch *Rezeptpflichtig* auswählen. Mit der Checkbox „Ergebnisse ohne Wert anzeigen“ legen Sie fest, ob auch Ergebnisse erscheinen sollen, die für das entsprechende Kriterium überhaupt keinen Wert besitzen, also in diesem Fall keinen Eintrag im Artikelstamm für die Abgabebestimmung. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

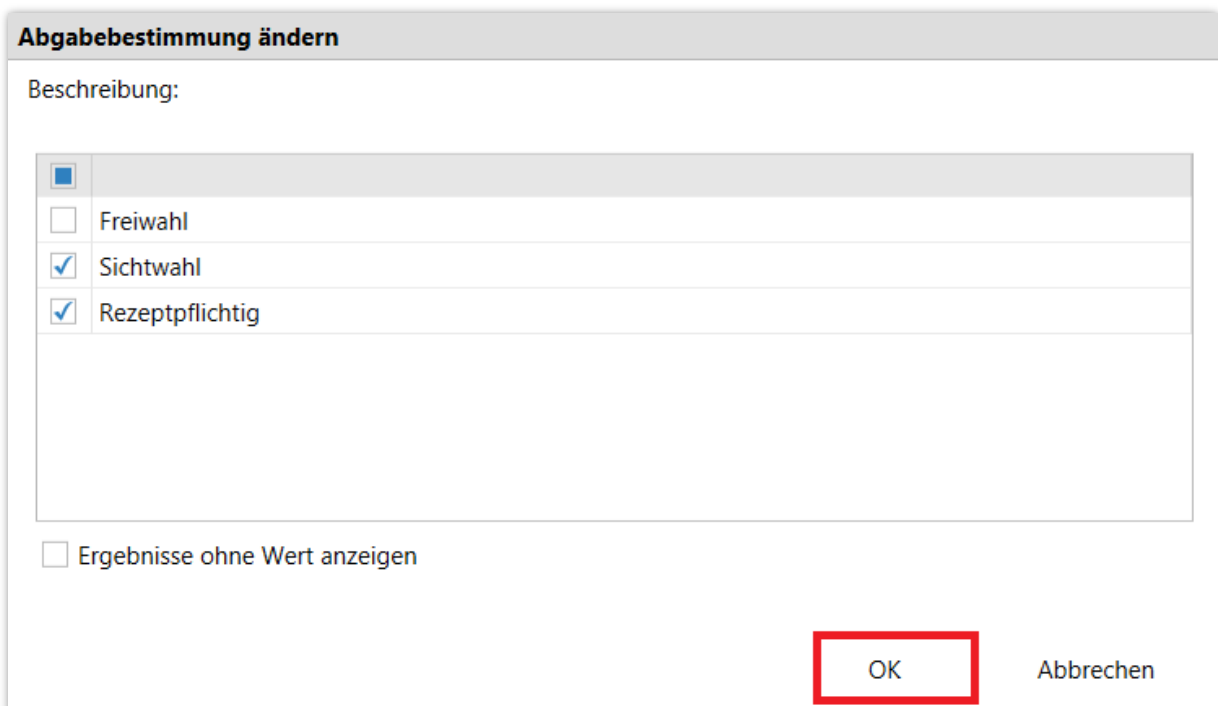

Nach jeder Änderung der Kriterien wird die Ergebnisliste im unteren Teil des Fensters direkt aktualisiert.


Im Beispiel sollen noch bestimmte Artikel ausgeschlossen werden, die laut ApBetrO stets vorrätig gehalten werden müssen. Mit Hilfe des Buttons  können Sie dies detailliert konfigurieren.


Liste aller Lagerartikel, die seit einem halben Jahr nicht verkauft wurden und die in den vergangenen 4 Monaten nicht neu an Lager gelegt wurden.

Absatz (abgegebene Packungen) im Zeitraum von bis

Zeitraum Zwischen den letzten 6 und 0 Monaten (Feb. 2020 - Aug. 2020)

Statusdatum Zwischen den letzten 399 und 4 Monaten (Mai 1987 - Apr. 2020)

Vorrätig (§15 (1) ApBetrO) 

Absatz pro Monat (AMO) von bis 

Nehmen Sie beispielsweise jene Arzneimittelgruppen aus der Auswahl heraus, die in Ihrer Apotheke ohnehin nur in geringen Mengen für den Notfallbedarf bereitliegen, wie z. B. Tetanus-Immunglobuline oder Epinephrin zur Injektion. Lassen Sie „Ergebnisse ohne Wert anzeigen“ dabei angehakt, damit alle Artikel ohne die Kennzeichnung „vorrätig nach Apothekenbetriebsordnung“ erfasst werden.



Zusatztip: Sie können das Kriterium „Vorrätig nach ApBetrO“ auch dafür nutzen, um eine Ladhüterliste speziell für BtM-Artikel zu erstellen. Haken Sie dafür nur „Betäubungsmittel“ in der Auswahl an und lassen Sie alle anderen Checkboxen leer.

Vorrätig (§15 (1) ApBetrO) ändern

Beschreibung: Die einzelnen Werte fassen Gruppen von Arzneimitteln oder weiteren Produkten zusammen, aus denen Präparate gemäß § 15 (1) Satz 2 der Apothekenbetriebsordnung 2012 in der Apotheke vorrätig zu halten sind.


<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Betäubungsmittel
<input type="checkbox"/>	Glucocorticosteroide zur Injektion
<input type="checkbox"/>	Antihistaminika zur Injektion
<input checked="" type="checkbox"/>	Glucocorticoide zur Inhalation zur Behandlung von Rauchgas-Intoxikationen
<input checked="" type="checkbox"/>	Antischaum-Mittel zur Behandlung von Tensid-Intoxikationen
<input checked="" type="checkbox"/>	medizinische Kohle, 50 Gramm Pulver zur Herstellung einer Suspension
<input type="checkbox"/>	Tetanus-Impfstoff
<input type="checkbox"/>	Tetanus-Hyperimmun-Globulin 250 I.E.

Ergebnisse ohne Wert anzeigen

OK Abbrechen

Wenn Sie alle Kriterien nach Ihren Wünschen angepasst haben, können Sie die Ergebnisse ausdrucken, als PDF speichern oder aber die Daten auf verschiedene Weise verarbeiten. Dazu dient die Funktionsleiste unter den Ergebnissen.


Dort wird Ihnen auch die Gesamtzahl der Ergebnisse angezeigt. Sie können in der Ergebnisliste einzelne Artikel markieren, wenn Sie nur bestimmte Ergebnisse verarbeiten möchten. Wenn Sie keine Markierung vornehmen (wie im Beispiel, „ausgewählt: 0“), wird die vollständige Ergebnisliste verarbeitet.

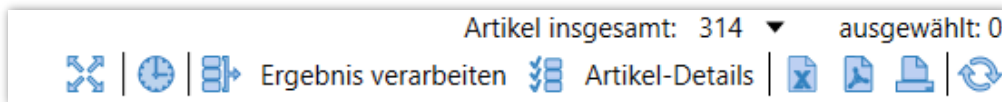

Um die in der Auswertung gefundenen Ladenhüter im Beispiel massenhaft zu bearbeiten, wählen Sie den Button **Ergebnis verarbeiten** aus.

Im Fenster **Ergebnisverarbeitung für Artikel** haben Sie nun eine ganze Reihe an Möglichkeiten, z. B. können Sie den Lagerstatus ändern, retournieren oder Lagerdaten wie „Artikel bevorzugt abzugeben“ anpassen.

Im Beispiel sollen die gefundenen Ladenhüter als Auslaufartikel gekennzeichnet werden. Wählen Sie dazu die **Bestelloptimierung** aus, setzen Sie ein Häkchen in die Checkbox bei **Wert für Auslaufartikel festlegen** und markieren Sie den Punkt **Auslaufartikel**. Bestätigen Sie mit **OK**.

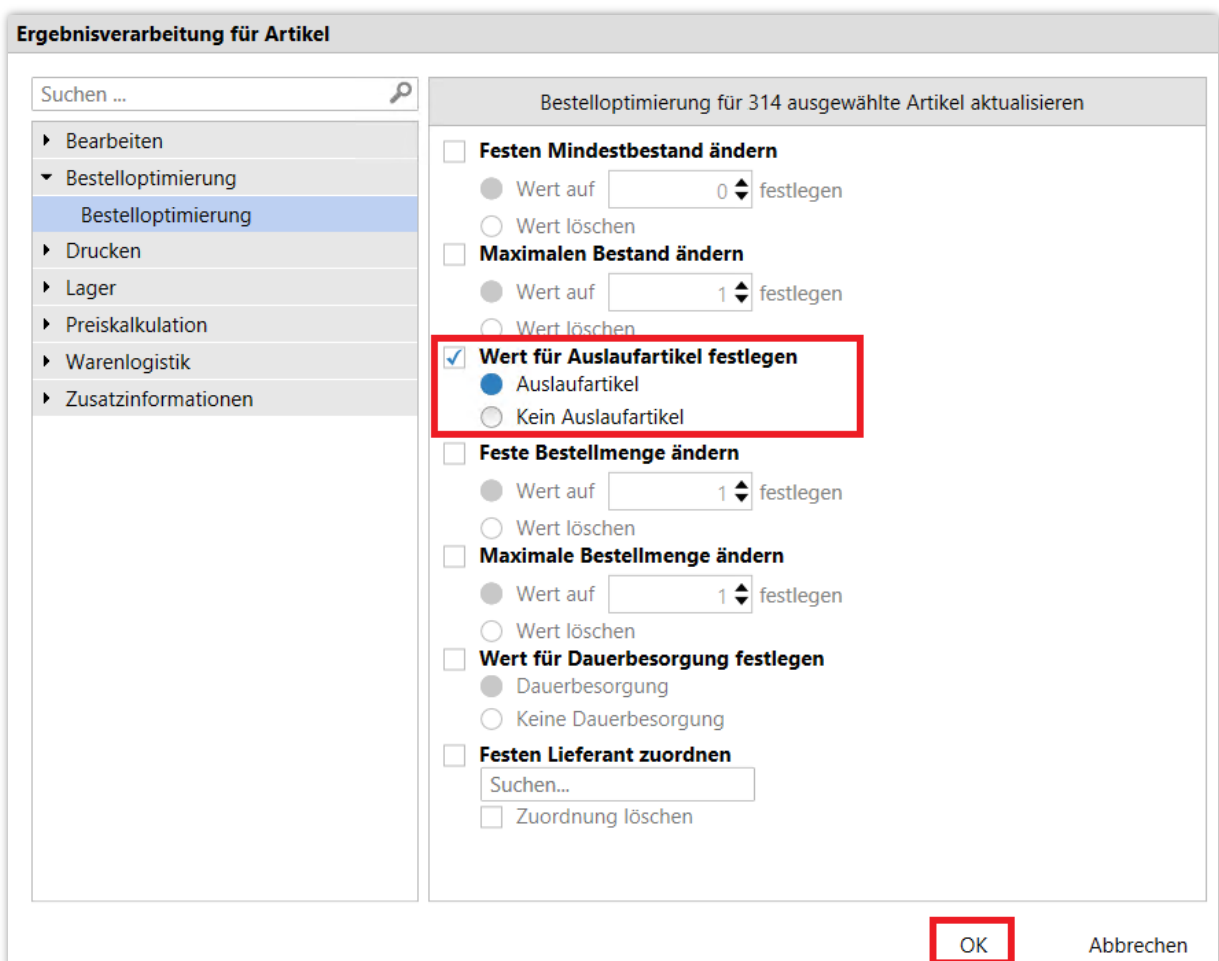

Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage. Erst nach Bestätigen mit **Ja** wird die Änderung an den Artikeldaten ausgeführt.

Ergebnisverarbeitung durchführen?

Wollen Sie die ausgewählte Ergebnisverarbeitung wirklich an einem Artikel unwiderruflich durchführen? Diese Aktion ist in der Regel nicht umkehrbar und verändert/überschreibt ggf. Einstellungen Ihrer Apotheke.

Ja

Nein

Die erfolgreiche Ergebnisverarbeitung wird Ihnen schließlich mit einer Meldung bestätigt.

Ergebnisverarbeitung für Artikel


Die Aktion 'Bestelloptimierung aktualisieren' war für alle ausgewählten Artikel erfolgreich.

So können Sie mit Hilfe der **Reports** eine Vielzahl an Informationen aus allen Bereichen des Apothekenbetriebs auswerten und die Ergebnisse direkt und massenhaft bearbeiten.

Viele weitere Tipps zum Modul **Reports**, z. B. zum Sortieren der Ergebnisse oder zu Berechnungsmöglichkeiten, finden Sie in der [IXOS Onlinehilfe](#).



Zusatztipps zum Thema Ladenhüter: Beim Umgang mit Ladenhütern in der Apotheke sind auch bestimmte Systemeinstellungen in IXOS hilfreich.

So werden Artikel in IXOS standardmäßig nach 180 Tagen ohne Verkauf als Ladenhüter  gekennzeichnet, was Sie in den Systemeinstellungen → Sortiment → Artikelverwaltung → Gültigkeitsbereich: Systemparameter → Bestellabfragen anpassen können.

In den Systemeinstellungen der Warenlogistik (Systemeinstellungen → Sortiment → Warenlogistik → Gültigkeitsbereich: Systemparameter → Bestellabfragen) können Sie einstellen, ob beim Bestellen eines von IXOS als Ladenhüter markierten Artikels die Bestellabfrage für Ladenhüter erscheinen soll. Somit werden Sie beim Bearbeiten Ihrer Bestellungen auf Ladenhüter hingewiesen und können entscheiden, ob diese wirklich noch einmal bestellt werden sollen.