



Inventurgerät Xplore DT4100

Kurzanleitung für XT-Systeme



Inhalt

1	Inventurgerät Xplore DT4100	2
1.1	Anzeigen und Gerätetasten	2
2	Vorbereitungen.....	2
2.1	Schnittstelle zur XT Warenwirtschaft konfigurieren.....	2
2.2	Inventurgerät laden und initialisieren	3
3	Inventurartikel erfassen.....	4
3.1	Suchen, Addieren, Ändern, Löschen	5
3.1.1	Suchen.....	5
3.1.2	Addieren.....	5
3.1.3	Ändern	5
3.1.4	Löschen.....	5
4	Inventurdaten in die XT-Warenwirtschaft übertragen	6
5	Import in das XT-Inventurprogramm	7
5.1	Mit den übertragenen Daten eine neue Inventur erstellen	7
5.2	Daten zu einer bereits existierenden Inventur hinzufügen.....	8

1 Inventurgerät Xplore DT4100

1.1 Anzeigen und Gerätetasten



Basisstation, Bedientasten und USB-Anschluss des Inventurgeräts Xplore DT4100

2 Vorbereitungen

Bevor Sie mit der Inventur beginnen, sollten Sie die Schnittstelleneinstellungen zu Ihrer XT-Warenwirtschaft kontrollieren und ggf. korrigieren.

2.1 Schnittstelle zur XT Warenwirtschaft konfigurieren

Öffnen Sie im Programm **Systempflege - Einstellungen/Variablen** den Navigationseintrag **Variablenpflege**.

Wählen Sie aus der Auswahlliste im Karteireiter **Var.Texte** den Eintrag **Sendeparameter/Arten**.

Wechseln Sie auf Karteireiter **PT7x** und wählen **Ändern-F3**.

Der Fokus wechselt auf das Eingabefeld **Gerät**.

Wählen Sie über die Leertaste Ihrer Tastatur den Eintrag **PT-Android** und übernehmen Sie Ihre Änderung mit **Zurück-F1**.



Beispiel: Konfigurieren der XT Schnittstelle für das Inventurgerät **Xplore DT4100**

2.2 Inventurgerät laden und initialisieren

Stecken Sie das Inventurgerät in die Ladeschale und laden Sie es vollständig auf. Der Ladezustand wird in der Menüleiste oben rechts als % - Wert angezeigt.

Nehmen Sie das vollständig aufgeladene Gerät aus der Ladeschale und verbinden Sie es mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem XT-Warenwirtschaftsrechner (Host).



Das Inventurgerät kann nur am XT-Host über eine der vorderen oder hinteren USB-Buchsen angeschlossen werden.


USB-Verbindung zur Geräteinitialisierung über Rückseite XT Host

⚠ Bitte verbinden Sie bei mehreren Inventurgeräten immer nur jeweils ein Gerät mit Ihrer Warenwirtschaft.

Das Gerät initialisiert sich automatisch.


⚠ Das Gerät holt sich während der Initialisierung alle in der Taxe vorhandenen Artikel incl. Ihrer selbstangelegten Artikel. Dieser Vorgang dauert ca. 2 Minuten.

War die Initialisierung erfolgreich erhalten Sie die Meldung:

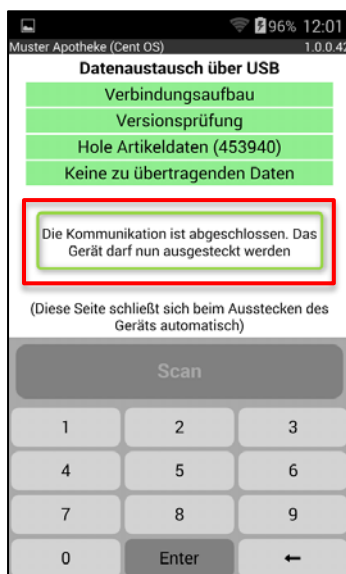


Stecken Sie das Inventurgerät ab.

Nach dem Ausstecken des Gerätes erhalten Sie folgendes Startbild:

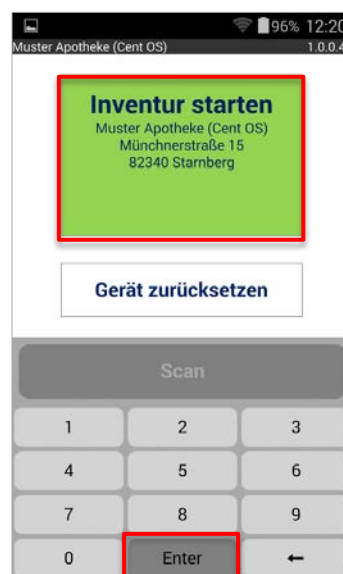

Tippen Sie auf **Enter** oder **Inventur starten**.

Die Scan-Taste wird aktiv (schwarze Schrift).

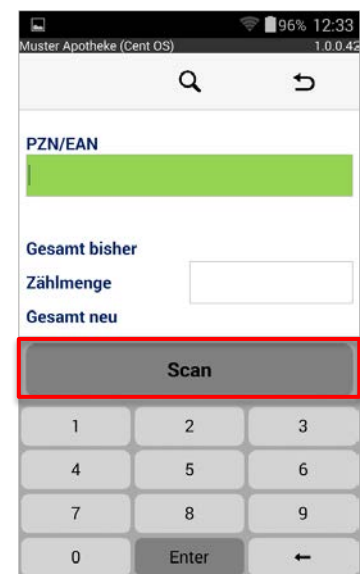

Sie können mit der Erfassung Ihrer Inventurartikel beginnen.

3 Inventurartikel erfassen

Bitte sichern Sie das Inventurgerät bei der Erfassung Ihrer Inventurartikel mit dem mitgelieferten Spiralkabel an Ihrem Handgelenk.

Tippen Sie die breite **Scan** -Taste und richten das rote Laser-Kreuz auf den PZN-/EAN-Code oder falls vorhanden, auf den DataMatrix-Code.

Sie erhalten eine akustische Bestätigung und können die angezeigte **Zählmenge 1** mit der gewünschten Anzahl überschreiben.

Verfahren Sie mit dem nächsten Artikel ebenso.


Nach dem letzten erfassten Artikel oder vor einer Pause bestätigen Sie Ihre letzte Stückzahl mit **Enter**.



Bei längeren Inventurvorgängen empfehlen wir, das Gerät während der Pausen in die Ladeschale zurück zu stellen.




Scannen Sie einen DataMatrix-Code, der nicht securPharm-konform ist, dann erhalten Sie folgende Meldung:

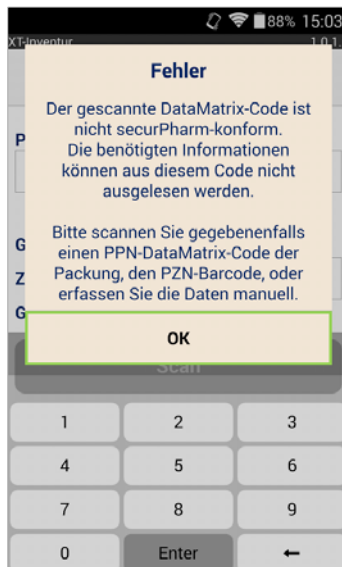

3.1 Suchen, Addieren, Ändern, Löschen

3.1.1 Suchen

Tippen Sie auf das **Suchen**-Symbol . Scannen Sie den gesuchten Artikel oder geben die gesuchte PZN ein.

Beim Suchen kann man die letzten 20 gescannten Artikel durch Scrollen im Display durchblättern.


3.1.2 Addieren

Durch mehrfaches Scannen eines Artikels wird die Menge sukzessive erhöht. Die Erhöhung wird im Display angezeigt.



PZN/EAN	
01842037	
MORADORM TABLETTEN TAB 20St	
Gesamt bisher	7
Zählmenge	1
Gesamt neu	8

3.1.3 Ändern

Tippen Sie auf das Edit-Symbol .

Das Edit-Fenster öffnet sich mit den Erfassungszeiten dieses Artikels.

Wählen Sie die gewünschte Erfassungszeit aus und überschreiben die Stückzahl im Feld **Menge** mit der gewünschten Stückzahl.


Bestätigen Sie die neue Stückzahl mit **Enter**.


3.1.4 Löschen

Tippen Sie auf das Löschen-Symbol  und bestätigen die Sicherheitsabfrage.

4 Inventurdaten in die XT-Warenwirtschaft übertragen

Verbinden Sie nacheinander **alle** Ihre Inventurgeräte über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem XT Warenwirtschaftsrechner (Host-Rechner).


 Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Inventurdaten nur an den Warenwirtschaftsrechner übertragen können, an dem Sie Ihre Inventurgeräte initialisiert haben, vgl. Kapitel [Inventurgerät laden und initialisieren](#).

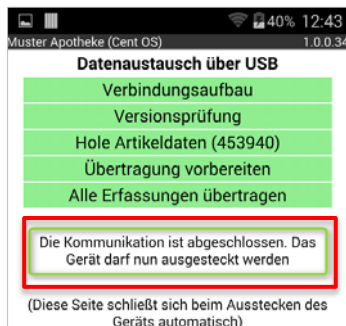

Benutzen Sie dazu bitte eine der vorderen oder hinteren USB-Buchsen Ihres Warenwirtschaftsrechners.

Die Inventurgeräte synchronisieren sich automatisch mit Ihrer XT Warenwirtschaft. Sind alle Erfassungen übertragen und ist die Kommunikation abgeschlossen, können Sie die Geräte ausstecken.

Alle Erfassungen übertragen, Kommunikation abgeschlossen

 Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nach Ihrer Artikelerfassung immer **alle Inventurgeräte** anstecken und mit Ihrer Warenwirtschaft synchronisieren!

Wurden nach einer Synchronisierung nochmals Inventurartikel erfasst, können Sie diese Inventurgeräte erneut mit Ihrer XT Warenwirtschaft synchronisieren, solange die Daten nicht zu einer Inventur hinzugefügt wurden. Es werden immer die zuletzt übertragenen Datenbestände Ihrer Inventurgeräte in Ihrer Warenwirtschaft gespeichert.

5 Import in das XT-Inventurprogramm

Die synchronisierten Daten importieren Sie nun in das Inventurprogramm der XT-Warenwirtschaft.

 Überprüfen Sie bitte **vor** dem Import, ob Sie evtl. ein Inventurgerät nicht eingelesen oder nachträglich erfasste Daten nicht synchronisiert haben.

5.1 Mit den übertragenen Daten eine neue Inventur erstellen

Öffnen Sie über **Sortiment** das Programm **Inventur**.

Im Menüpunkt **Jahres-Inventur** starten Sie mit **Neue Inventur–F3** die Einstellungsmaske. Als Erfass-Option ist **Inventurgerät einlesen** vorbelegt.

Starten Sie mit **OK–F12** die Bearbeitung, so erscheint folgende Anweisung:



Inventurdatum	Bezeichnung	Anlage
05.10.2017	INVENTUR_05102017	05.10.2017 15:01


Übertragung vom Gerät	Artikel
07.09.2017 12:30:46	9

Beispiel: Inventurgerät einlesen

Am Hauptrechner mit **Anfrage starten–F12** den Upload der Daten starten.


Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, wechselt die Ansicht in den Vollmodus der **Fehlerlistenbearbeitung** und der Fokus liegt auf dem ersten Artikel der ersten angezeigten Fehlerliste.

5.2 Daten zu einer bereits existierenden Inventur hinzufügen

 Sollten Sie **Daten zu einer Inventur hinzufügen** wollen (z.B. die Inventur wurde aus dem System erstellt und es werden nur bestimmte Artikel gezählt und hinzugefügt), so erfassen und übertragen Sie die Daten und gehen wie folgt weiter vor.

Öffnen Sie über **Sortiment** das Programm **Inventur**.
Im Menüpunkt **Jahres-Inventur** unterlegen Sie die Jahresinventurzeile, die Sie ergänzen wollen und betätigen die Tastenkombination **Bestände erfassen–Strg+F12**.

In der folgenden Abfrage bestätigen Sie **Ergänzen**.

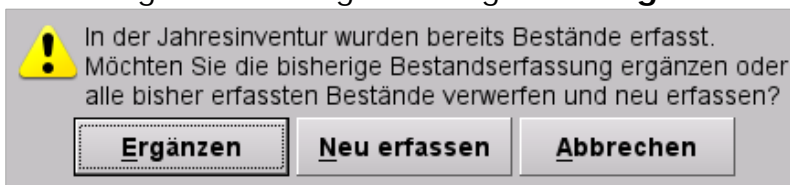

Beispiel: Abfrage

Es wird Ihnen der Dialog **Jahresinventur anlegen** angezeigt.
Im Feld **Inventurmengen erfassen** stellen Sie auf **Inventurgerät einlesen** um.

Starten Sie mit **OK–F12** die Bearbeitung, so erscheint folgende Anweisung:



Beispiel: Inventurgerät einlesen

Am Hauptrechner mit **Anfrage starten–F12** den Upload der Daten starten.
Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, wechselt die Ansicht in den Vollmodus der **Fehlerlistenbearbeitung** und der Fokus liegt auf dem ersten Artikel der ersten angezeigten Fehlerliste.