

## Internationale Arzneimittel




Sowohl Arztpraxen als auch Apotheken stehen mitunter vor diesem Problem: Ein Patient nennt den Namen eines Arzneimittels aus dem Ausland, aber niemand weiß, welcher Wirkstoff sich dahinter verbirgt und welches deutsche Arzneimittel stattdessen verordnet bzw. abgegeben werden könnte.

Mit einer Suche in der ABDA-Datenbank kommen Sie in solchen Fällen schnell und sicher an die gesuchten Informationen. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie dazu vorgehen können.

In diesem Beispiel ruft eine Arztpraxis bei Ihnen an und möchte wissen, was „Idroquark“ ist. Der Patient in der Praxis hat nur einen leeren Blister mit dieser Beschriftung in der Hand und benötigt eine neue Verordnung.

Öffnen Sie im Menü **Beratung** die **ABDA-Datenbank**.

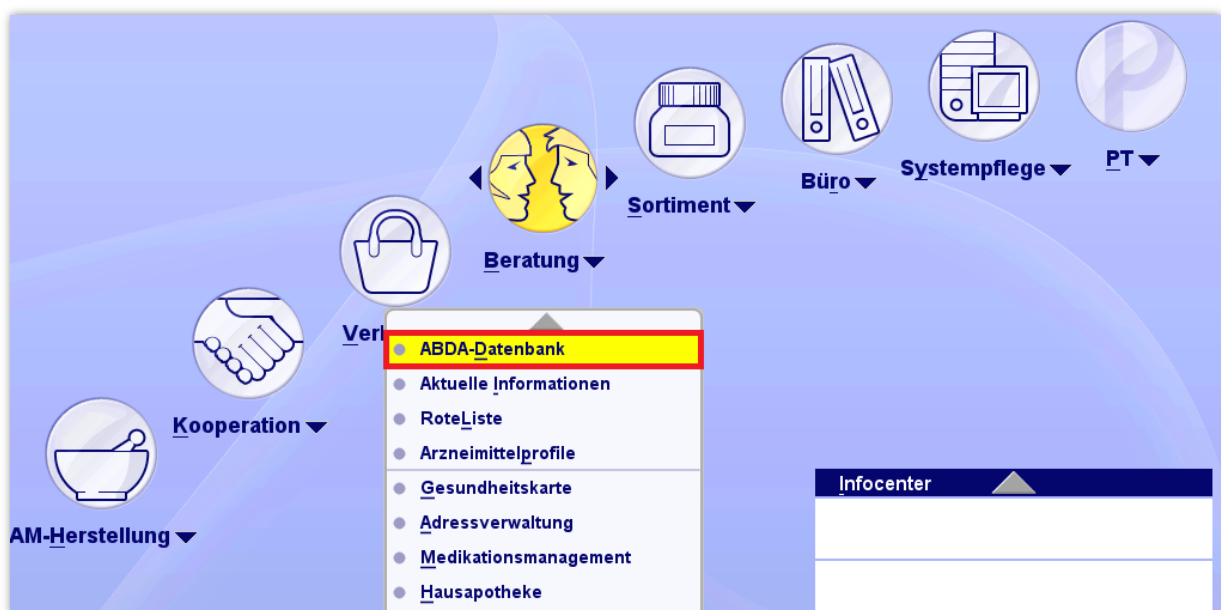

Öffnen Sie in der ABDA-Datenbank die Seite **Internationale FAM**.


Nun geben Sie das rätselhafte Präparat in das Suchfeld **Artikelbezeichnung/PZN** ein.





Sie können hier nach vielen verschiedenen Kriterien suchen, die sich mit Hilfe der Verknüpfungen **und** / **oder** / **nicht** kombinieren lassen. Der Reiter **Spezielsuche** enthält weitere Suchkriterien, wie z. B. die Therapierichtung. Im Reiter **C.A.V.E** lassen sich Arzneimittel auch patientenbezogen in Bezug auf ihre Eignung bei Allergien oder Erkrankungen filtern.


**ABDA-Datenbank - Intern. FAM**


**Arzneimittel** | **Spezielsuche** | **C.A.V.E**


Artikelbezeichnung/PZN  


Anbieter  


Stoffbezeichnung  


ATC-Code  


... Suchwort  

Land (Anbieter)  

Darreichungsform  

Abgabeform  

Anwendungsform  

Applikationsweg  

Aktuelle Verknüpfung  und  oder  nicht

**Rechercheergebnisse**

Verknüpfung	Kriterium	Suchkriterium	Treffer	Treffer gesamt


ESC | STRG ALT | F1 | F2 | Neue Suche F3 | Eingaben löschen F4 | Verknüpfung ändern F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | Trefferliste anzeigen F12

Nach Eingabe des Namens und Bestätigen mit der **Enter**-Taste öffnet sich das Fenster **Artikelbezeichnung**, das mögliche Kandidaten für diesen Namen auflistet.


Hier können Sie entweder alle Treffer in die Recherche übernehmen mit **Alle Treffer – F5** oder direkt das passende Präparat markieren und mit **OK – F12** bestätigen, wenn Sie es schon anhand des Namens identifizieren können.

Die Wirkstoffstärke, die auf dem Tablettenblister des Patienten aufgedruckt ist, hilft in diesem Beispiel, das richtige Präparat sofort zu identifizieren.

**Artikelbezeichnung**

Suchbegriff  

**Artikelbezeichnung**

Idroquark 2,5mg/12,5mg, Tabletten, Polifarma s.p.a., (I) 

Idroquark 5mg/25mg, Tabletten, Polifarma s.p.a., (I)

Alle Treffer F5 | **OK F12** | Abbrechen Esc

Nach Auswahl des entsprechenden Präparats erscheint es als einziger Treffer in der Rechercheliste, weitere Suchkriterien sind nicht mehr nötig.

Schließen Sie Recherche ab mit **Trefferliste anzeigen – F12**.

**ABDA-Datenbank - Intern. FAM**

**Arzneimittel** | **Spezielsuche** | **C.A.V.E**

Artikelbezeichnung/PZN  Darreichungsform

Anbieter  Abgabeform

Stoffbezeichnung  Anwendungsform

ATC-Code  Applikationsweg

... Suchwort

Land (Anbieter)

Aktuelle Verknüpfung  und  oder  nicht

**Rechercheergebnisse**

Verknüpfung	Kriterium	Suchkriterium	Treffer	Treffer gesamt
	Artikelbezeichnung	Idroquark 2,5mg/12,5mg (Polifarma s.p.a.)	1	1

ESC STRG ALT F1 F2 **Neue Suche F3** **Eingaben löschen F4** **Verknüpfung ändern F5** F6 F7 F8 F9 F10 F11 **Trefferliste anzeigen F12**

In der **Trefferliste** sehen Sie, dass es sich um ein italienisches Arzneimittel in Tablettenform handelt.



Mit **Filter – F6** kann man die Auswahl bei einer längeren Trefferliste bei Bedarf weiter einschränken, z. B. auf die Anzahl der Wirkstoffe oder den rechtlichen Status.

**Doppelklicken** Sie das Präparat, um mehr Informationen dazu zu erhalten.

**ABDA-Datenbank - Intern. FAM**

**1 Treffer gefunden**

Artikelbezeichnung	Darreichungsform	Anbieter	Land	CAVE
Idroquark 2,5mg/12,5mg	Tabletten	Polifarma	I	CAVE

Nun sehen Sie, dass es sich um die Wirkstoffkombination Ramipril / HCT handelt.  
Um nun nach geeigneten Alternativen zu suchen, wählen Sie die Seite **Vergleichssuche** aus.

**ABDA-Datenbank - Intern. FAM**

Artikelbezeichnung	Darreichungsform	Anbieter	Land	CAVE
Idroquark 2,5mg/12,5mg	Tabletten	Polifarma	I	CAVE

**Basisinfo**

**Verkehrskennzeichen:**

<b>1 Tabl. enthält:</b>	
Ramipril	2.5 mg
Hydrochlorothiazid	12.5 mg

**ATC-Code (WHO):**

C	Kardiovaskuläres System
C09	Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System
C09B	ACE-Hemmer, Kombinationen
C09BA	ACE-Hemmer und Diuretika
C09BA05	Ramipril und Diuretika

**Therapieichtung:**

Pharmakotherapeutikum

**Darreichungsformstruktur:**

Abgabeform:	fest
Galen. Grundform:	Tablette, nicht überzogene
Freisetzungsverhalten:	normal

Anwendungsform: fest  
Applikationsweg: peroral

ESC STRG ALT F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Drucken F9 F10 F11 F12

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten der **Vergleichssuche**: Bei der **Schnellsuche** wird stufenweise nach bestimmten Kriterien, ausgehend von identischem Wirkstoff, gleicher Wirkstoffstärke und gleicher Darreichungsform, gesucht wird. Die Schnellsuche bringt Sie in vielen Fällen zum Ziel, aber wenn Sie die Vergleichskriterien selbst festlegen möchten, entscheiden Sie sich für die **Suche anhand Vorgaben**.

<b>Vergleichssuche</b>	Schnellsuche
Wirkstoffdossiers	<b>Suche anhand Vorgaben</b>

Die Voreinstellung für die **Suche anhand Vorgaben** enthält bereits eine nützliche Auswahl an Kriterien, wie gleicher Wirkstoff, gleiche Wirkstoffstärke sowie die Einschränkung auf deutsche Fertigarzneimittel.

Legen Sie die gewünschten Auswahlkriterien fest, z. B. gleiche Wirkstoffe ohne Entspricht-Stoffe oder andere Salze, gleiche Darreichungsform, keine AV/Rückruf-Artikel, um für den Patienten möglichst gleichwertige Alternativen zum italienischen Originalpräparat ausfindig zu machen. Wählen Sie dann **Trefferliste anzeigen – F12 aus**.

**ABDA-Datenbank - Intern. FAM - Vergleichssuche**

Artikelbezeichnung: Idroquark 2,5mg/12,5mg | Darreichungsform: Tabletten | Anbieter: Polifarma | Land: I | Rp. | CA | 1 von 1

**Suche anhand Vorgaben**

**Arzneimittel** | **C.A.V.E**

Suche anhand Vorgaben

**Stoffeigenschaften**

- gl. Wirkstoffe ja
- gl. Hilfsstoffe
- gl. Wirkstoffstärke
- zusätzl. Wirkst. zulässig
- mit Entspricht-Stoff
- mit Salzen/Derivaten

**Indikation / Herkunft**

- gl. Indikation
- gl. ATC-Code
- gl. Anbieter
- Fertigarzneimittel: nur deutsche
- gl. Herkunftsland

**Darreichung**

- gl. Darreichungsform
- gl. Abgabeform
- gl. galenische Grundform
- gl. Freisetzungverhalten

**Taxe-Informationen**

- mit AV, Rückruf etc.
- nur Lagerartikel
- nur verschreibungspflichtig
- nur nicht verschreibungspfl.
- sofort mit Taxdaten
- gl. Packungseinheit
- nur Krankenhausartikel

Applikation

ESC | STRG/ALT | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | **Trefferliste anzeigen F12**

Es werden nun alle geeigneten deutschen Fertigarzneimittel angezeigt, die Sie der anfragenden Arztpraxis als Alternativen vorschlagen können. Mit **Taxe-Ansicht – F12** können Sie die Auflistung auch direkt in die **Artikelverwaltung** übernehmen.

**ABDA-Datenbank - Intern. FAM - Vergleichssuche**

Artikelbezeichnung: Idroquark 2,5mg/12,5mg | Darreichungsform: Tabletten | Anbieter: Polifarma | Land: I | Rp. | CA | 1 von 1

**14 Treffer gefunden**  
identisch in den eingestellten Vorgaben

Artikelbezeichnung	Darreichungsform	Anbieter	Land	Rp.	CA
<b>Delix 2,5mg plus</b>	Tabletten	Sanofi-Aventis	D		CAV
Ramiclair 2,5mg/12,5mg Plus	Tabletten	Hennig	D		CAV
<b>RamiLich comp. 2,5mg/12,5mg</b>	Tabletten	Zentiva	D		CAV
Ramiplus AL 2,5mg/12,5mg	Tabletten	ALIUD	D		CAV
Ramiplus STADA 2,5mg/12,5mg	Tabletten	STADAPHARM	D		CAV
Ramipril beta comp 2,5mg/12,5mg	Tabletten	Betapharm	D		CAV
RAMIPRIL COMP BASICS 2,5mg/12,5m	Tabletten	Basics	D		CAV
Raminril comp. AbZ 2,5mg/12,5mg	Tabletten	AbZ-Pharma	D		CAV

Inhaltsstoffe | Dosierung | Darreichungsformstruktur | Indikationsschlüssel | ATC-Code

Idroquark 2,5mg/12,5mg | TAB | Delix 2,5mg plus | TAB

**1 Tabl. enthält:**

Ramipril	2.5 mg	Ramipril	2.5 mg
Hydrochlorothiazid	12.5 mg	Hydrochlorothiazid	12.5 mg
		(H) Maisstärke, vorverkleistert	+
		(H) Cellulose, mikrokristalline	+
		(H) Hypromellose	+
		(H) Natriumstearylformarat	+

ESC | STRG/ALT | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | Drucken | F9 | F10 | F11 | **Taxe-Ansicht F12**